


## 1 Porniți Tri Auto mini: apăsați butonul principal.

Se afișează ecranul de stand-by.

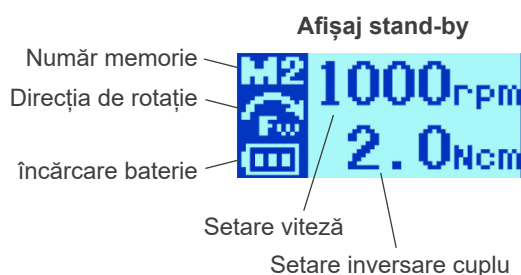

## 2 Selectați numărul memoriei: apăsați butoanele plus sau minus.

\* Există șase memorii disponibile

Setările din fabrică sunt indicate mai jos.


Setare	Memorie		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Viteză (rpm)	400	400	250
Inversare cuplu (Ncm)	1,0	0,8	0,6

## 3 Porniți motorul: apăsați din nou butonul principal.

Se afișează ecranul pentru cuplu.

\* Dacă mențineți butonul principal apăsat, motorul va funcționa doar cât timp acesta este apăsat și se va opri când îl eliberați.

Afișaj cuplu

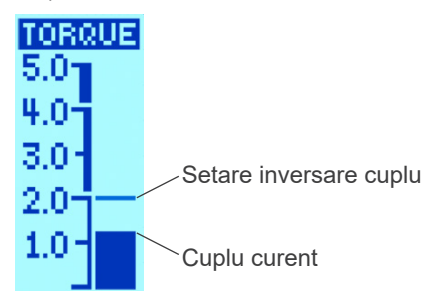

## 4 Opriți motorul: apăsați din nou butonul principal.

Se reafișează ecranul de stand-by.

