

Ghid rapid Tri Auto ZX2

Înainte de utilizare și Reprocesare

- * Citiți instrucțiunile de utilizare însoțitoare înainte de a utiliza Tri Auto ZX2.
- * Purtați întotdeauna mănuși corespunzătoare atunci când efectuați lucrări de Reprocesare.




Pentru mai multe informații, scanați codul QR din dreapta.




Înainte de utilizare

Asamblarea componentelor



Pasul 1
Conectați contra-unghiul

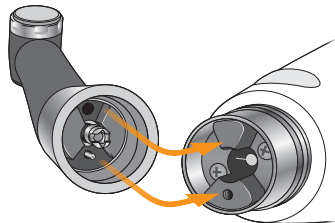

Pasul 2
Montați manșonul de protecție HP

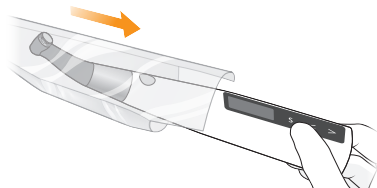


Pasul 3
Conectați firul sondei

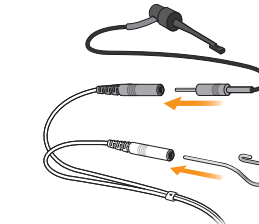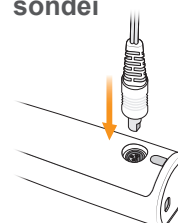

⚠️ PRECAUTIE
Conectați contra-electrodul (cârligul) la conectorul alb al sondei.

Pasul 4
Montați acul endodontic

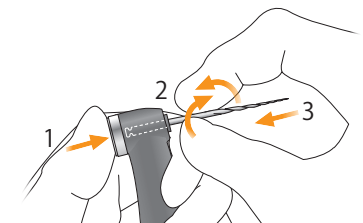


Verificarea funcțiilor

Pasul 1
Funcție de localizare apex

Porniți sursa de alimentare. Ecranul LCD arată „m1”. Atingeți contra-electrodul (cârligul) cu port-acul endodontic și elementul de prindere la capătul port-acului endodontic; asigurați-vă că toate barele indicatoare de pe indicatorul de pe ecranul LCD se aprind.

⚠️ AVERTISMENT


Dacă nicio bară indicatoare nu se aprinde, opriți imediat instrumentul și asigurați repararea acestuia de către un specialist.

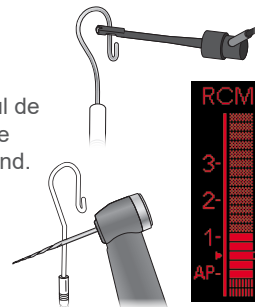


Pasul 2
Rotația motorului

Selecționați „m4” (modul OTR). Puneți în funcțiune motorul pentru a vedea dacă acesta se rotește fără întreruperi.

- Dacă motorul alternează între rotația înainte și cea inversă: calibrați instrumentul.
- Dacă instrumentul emite vibrații sau zgomote anormale: întrerupeți imediat utilizarea instrumentului și asigurați repararea acestuia de către un specialist.

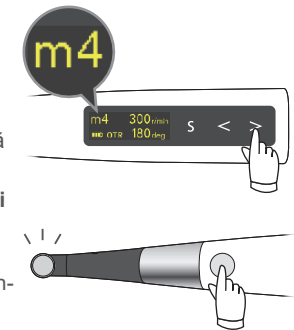


Pornirea/oprirea sursei de alimentare

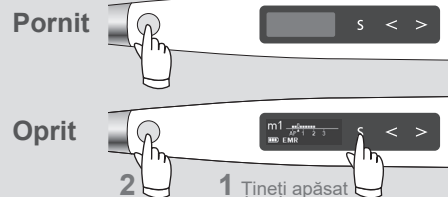

Calibrare (Înainte de prima folosire după achiziționare, după ce ați înlocuit contra-unghiul, dacă acțiunea OTR este declanșată în mod necorespunzător sau la întâmplare etc.)

Conectați contra-unghiul. Cu instrumentul oprit, țineți apăsat comutatorul de setare stânga (<) și apoi apăsați comutatorul de alimentare.

Apăsați comutatorul de setare dreapta (>) pentru a porni calibrarea. După calibrare, instrumentul va reveni automat la ecranul cu modul de așteptare.

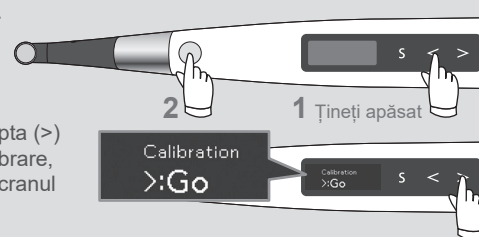


Verificarea cu testerul (o dată pe săptămână)

Activați comutatorul de alimentare. Conectați testerul. Verificați citirea afișată.

- Dacă indicatorul se aprinde pe mai puțin de două bare de la bara nr. 1: normal

- Dacă indicatorul se aprinde pe maxim trei bare față de bara nr. 1: întrerupeți imediat utilizarea instrumentului și asigurați repararea acestuia de către un specialist.

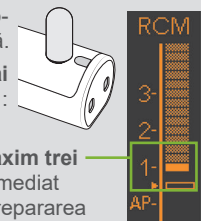

Reprocesare – după fiecare tratament

După utilizare

Pasul 1
Oprii alimentarea



2
1 Țineți apăsat

Pasul 2
Îndepărtați acul endodontic



1 2

Pasul 3
Scoateți manșonul de protecție HP



⚠️ AVERTISMENT
Nu refolosiți niciodată manșonul de protecție HP.

Pasul 4
Încărcați bateria




Sterilizare

Piese care trebuie sterilizate

- a. Port-ac endodontic
- b. Contra-electrod
- c. Contra-unghi
- d. Suport piesă de mână*
- e. Electrode al acului endodontic extern (cu capac)*

Pasul 1
W

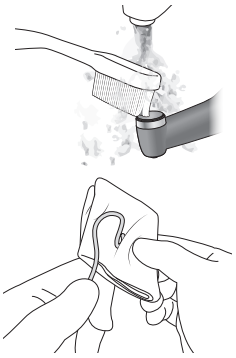

Pasul 2
Curățare și dezinfectare


Condiții de funcționare pentru aparate de spălare-dezinfectare la temperaturi înalte

Denumire unitate	Miele G7881
Mod	Vario TD
Detergent (concentrație)	neodisher MediClean (0,3 – 0,5%)
Clătire (concentrație)	neodisher MediKlar (0,02 – 0,04%)


Pasul 3
Lubrifiere (doar pentru contra-unghi)

Pulverizați MORITA MULTI SPRAY pe capătul de conectare al contra-unghiului timp de aproximativ 2 secunde.

Ștergeți orice soluție pulverizată în exces de pe contra-unghi.

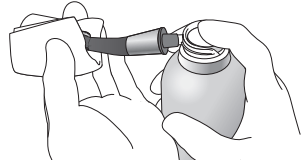

Pasul 4
Ambalare



Pasul 5
Sterilizare
Recomandare:

Țară: S.U.A.

Tip de sterilizator	Temperatură	Durată	Timp de uscare după sterilizare
Gravitație	+132°C	15 minute	15 minute
	+121°C	30 minute	

Țară: Alta decât S.U.A.


Eliminare dinamică a aerului	+134°C	3 minute	10 minute
		5 minute	
Gravitație	+134°C	min. 6 minute	min. 10 minute
	+121°C	min. 60 minute	


Dezinfectare

Părți care trebuie dezinfectate


- f. Piesă de mână cu motor
- g. Firul sondei
- h. Încărcare baterie
- i. Tester

Pasul 1
Dezinfectare



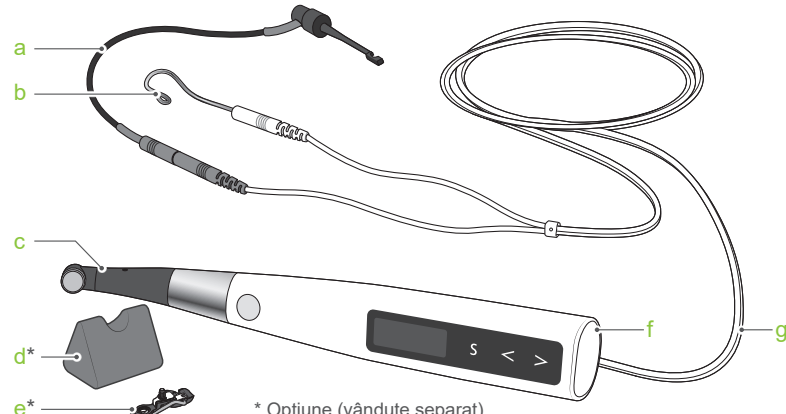

a
b
c
d*
e*

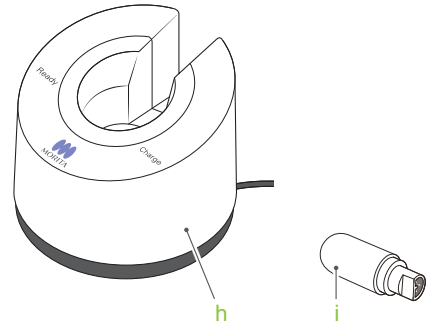

h
i

* Opțiune (vândute separat)

